


## HS- testovací PCD tělísko HELIX + 250 indikátorů

Katalogové číslo : 9008649

Poznámka: Testovací PCD tělísko nemá být použito pro více než 250 indikátorů

1. Před použitím zkontrolujte, že je přístroj v pořádku, pracovní prostor je suchý a komora není zahřátá.
2. Vyšroubujte uzávěr PCD tělíska
3. Vyjměte jeden chemický indikátor / proužek/ a přeložte jej na polovinu tak, aby chemické indikátory byly uvnitř.
4. Vložte proužek chemického indikátoru do štěrby uzávěru PCD tělíska.  
Složená strana by měla být uvnitř tělesa otevřeným koncem.
5. Ujistěte se, že je indikátor správně uložen a uzavřete uzávěr našroubováním zpět do těla PCD tělíska.
6. Vložte do komory malého parního sterilizátoru
7. Spusťte program HELIX test 134°C.
8. Po ukončení programu vyjměte PCD tělísko z přístroje. Dbejte opatrnosti z důvodu teploty plastového tělíska.
9. Vyšroubujte uzávěr PCD tělíska a vyjměte chemický indikátor. Pokud program proběhl za předepsaných parametrů, změní indikátor barvu rudé barvy na zelenou.
10. Indikační proužek je samolepící a lze jej uchovat v dokumentaci o sterilizaci

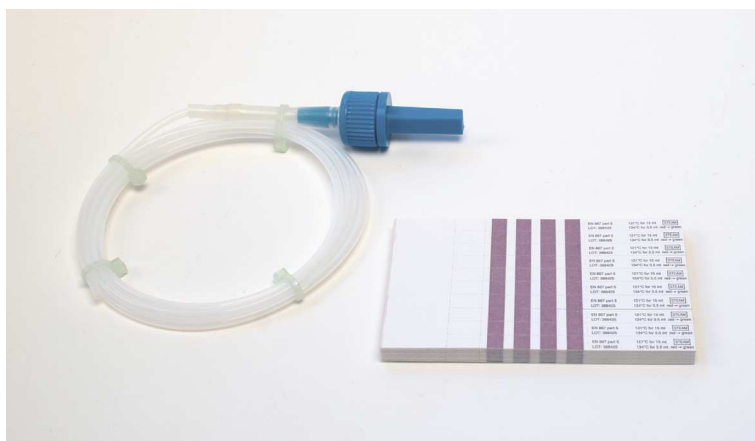

---

Produkt manažer sterilizace:

**Richard Janů**, tel.: 603 511 935, e-mail: richard.janu@henryschein.cz

**STERILIZACE**

---

**HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o.**

Palackého třída 537/163, 612 00 Brno, tel.: +420 548 525 162, fax: +420 545 222 272

Libušská 210, 142 00 Praha 4, tel.: +420 541 426 881, fax: +420 541 426 899, info@henryschein.cz

[www.hsdenal.cz](http://www.hsdenal.cz)

**zelená linka: 800 700 097**

[www.hsdenal-shop.cz](http://www.hsdenal-shop.cz)